

# miglionico

DENTAL EQUIPMENT



# ING

SPRACHE





## ZUVERLÄSSIGKEIT UND TECHNOLOGIE, DIE SICH JEDEM STIL ANPASSEN LÄSST

EINFACH UND VIELSEITIG IN DER ANWENDUNG,  
SORGT FÜR HOHE LEISTUNG UND MAXIMALE HYGIENE



## Arztelement




Die Behandlungseinheit NG verfügt über ein glasgekapseltes, schwenkbares Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Technologie. Durch die Drehung des Panels haben Sie sowohl bei stehender als auch bei sitzender Arbeitshaltung jederzeit den richtigen Blick auf das Display. Das Bedienfeld lässt sich dank der Sperrfunktion des Bildschirms leicht desinfizieren.

## Helferinelement



Die klaren, kantenlosen Linien und der komfortable, ergonomische Griff machen die Handhabung des Tisches extrem einfach. Das Helferinelement ist an einem doppelgelenkigen Arm befestigt und besteht aus einem soliden, kratzfesten und chemikalienbeständigen Material. Das Helferinelement verfügt über ein gläsernes Steuerungsdisplay mit kapazitiver Touch-Technologie und ist so konzipiert, dass es zwei Saugschläuche für die chirurgische Absaugung und zwei Zusatzinstrumente aufnehmen kann.

## NG Ausführung beidhändig

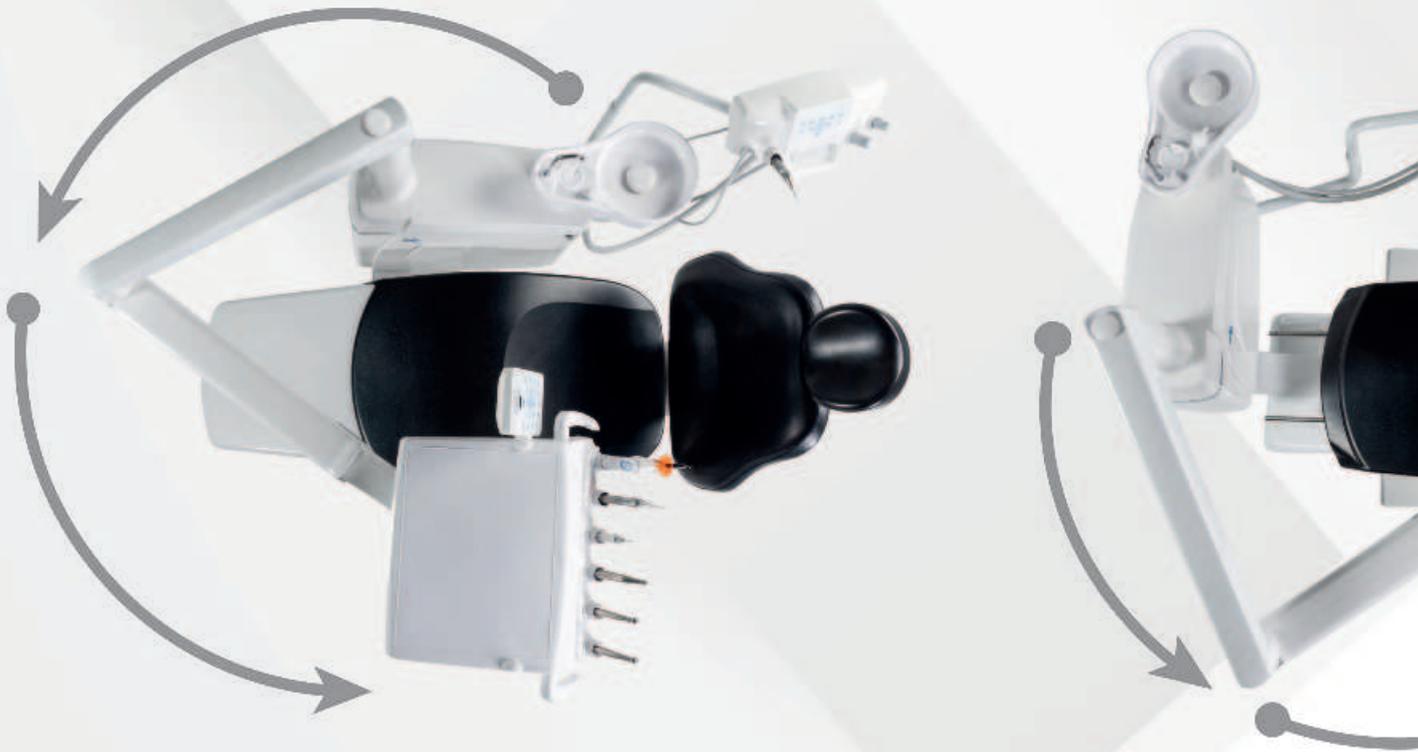

## Ausführung Surgery mit Cart





## Anpassbare Rückenlehne



Optional ist die Rückenlehne mit motorisierter vertikaler Verstellung erhältlich, die über die Tastatur gesteuert werden kann, um die korrekte Positionierung des Kopfes des Patienten, ob Kinder oder Erwachsene, auf der Kopfstütze zu gewährleisten.



## MDS / MDS+ SYSTEMS

Systeme zur Dekontaminierung von Wasserkreisläufen mit WK-Flüssigkeit von Metasys. Das MDS-System mischt WK-Flüssigkeit kontinuierlich mit Leitungs- oder Flaschenwasser, verhindert die Bildung von Kalk und Biofilm und reduziert so die bakterielle Belastung. Es trägt auch zur ordnungsgemäßen Funktion von Instrumentensprays bei.

Das System MDS+ kann über das Bedienfeld aktiviert werden. Nachdem Sie die Handstücke in den dafür vorgesehenen autoklavierbaren Halter gelegt haben, startet über das Bedienfeld der Zyklus zur Intensivdesinfektion. Wenn der Zyklus zur Intensivdesinfektion nicht aktiviert ist, arbeitet das System MDS+ im normalen MDS-Modus.

## Hygiene

Im Inneren der Wassereinheit lassen sich folgende Einheiten installieren:

### ASB-SYSTEM

2-Liter-Flasche für die autonome Wasserversorgung des Behandlungsmoduls. Ein Bypass-Ventil ermöglicht es, zwischen Leitungswasser und Wasser aus Flaschen zu wählen.



ABNEHMBARER UND IM DRUCKKESSEL WASCHBARER GRIFF FÜR BEDIENERBRETTCHEN



CHIRURGISCHE ABSAUGFILTER FÜR EINZELNE SCHLÄUCHE




ABNEHMBARER UND HYGIENISIERBARER BECKEN


## Integrierte Saugsysteme



ABLAUFVENTIL VOM SPEIBECKEN

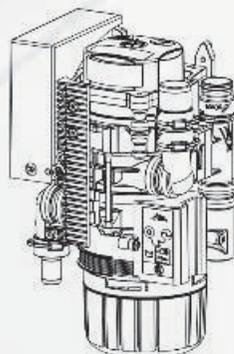

AMALGAMABSCHIEDER

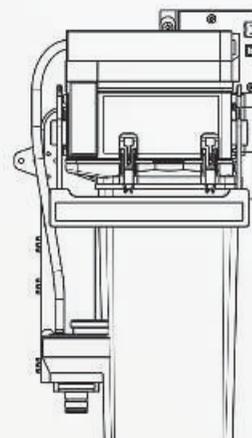

LUFT-/WASSERABSCHIEDER

Standardmäßig für die Nassabsaugung vorgesehen. Verfügbarkeit von integrierten Systemen an der Behandlungseinheit bei Trockenabsaugung und von Vorrichtungen zur Einhaltung der geltenden Gesetze zur Amalgamsorgung.

## Stuhl

Der Stuhl ist so konzipiert, dass er Komfort und Ergonomie bei der Arbeit bietet. Gepolstert mit nahtlosem medizinischem Skai-Leder für eine einfache Desinfektion. Die synchrone Bewegung von Rückenlehne und Sitz sorgt für optimalen Komfort und verhindert ein Hin- und Herrutschen. Die anatomisch geformte Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze ist in zwei Varianten erhältlich: Standard für alle Arbeitsergonomien und breit mit Memory-Schaum für die Chirurgie oder für mehr Patientenkomfort, ideal für längere Behandlungen.



CLASSIC RÜCKENLEHNE



XL MEMORY SCHAUM

## Farben

### STANDARDFARBEN



### SONDERFARBEN



## Fußanlasser

Der Fußanlasser ist solide, optimal ausgerichtet und verfügt über einen Stahlsockel, der für Stabilität bei der Benutzung sorgt. Der Griff ist einziehbar und erleichtert so den Transport. Erhältlich in der Standard- oder Push-Version, kabelgebunden oder kabellos.





**miglionico**  
DENTAL EQUIPMENT

**Miglionico S.r.l.**

Via Molise, Lotti 67/68 Z.I.

70021 - Acquaviva delle Fonti (BA) ITALY

P. Iva: 05306940726

Tel +39 080 759552

[www.miglionico.eu](http://www.miglionico.eu)

[info@miglionico.net](mailto:info@miglionico.net)



Italy:

[commerciale@miglionico.net](mailto:commerciale@miglionico.net)

Eu & Extra Eu

[export@miglionico.net](mailto:export@miglionico.net)

