

# miglionico

DENTAL EQUIPMENT



SPRACHE






## NEUSTE TECHNOLOGIE FÜR HÖCHSTLEISTUNGEN

Touch-Display  
VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE, INTUITIVE BEDIENUNG

## Arztelement



Die Behandlungseinheit NT verfügt über ein glasgekapseltes, schwenkbare Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Technologie. Durch die Drehung des Panels haben Sie sowohl bei stehender als auch bei sitzender Arbeitshaltung jederzeit den richtigen Blick auf das Display. Das Bedienfeld lässt sich dank der Sperrfunktion des Bildschirms leicht desinfizieren.

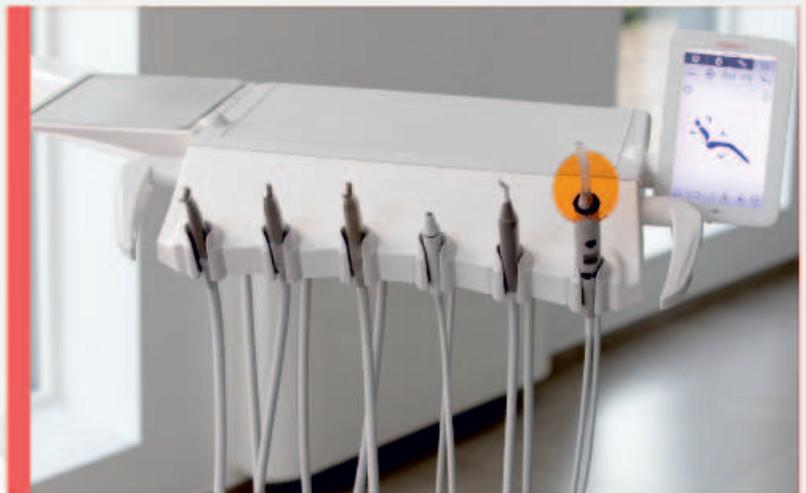

INNOVATIV, INTUITIV UND FUNKTIONAL Gewährleistet eine optimale Handhabung der Inhalte durch vielfältige Anpassungsmöglichkeiten. Der 7-Zoll-Farbbildschirm mit Glasoberfläche vereinfacht die Kontrolle von Parametern und Bewegungen und verbessert so die Betriebseffizienz und die Gesamtsicherheit.

## Helferinelement

Das Helferinelement bietet eine äußerst einfache Handhabung dank seines Designs mit klaren Linien und ergonomischem Griff. Es ist auf einem Doppelgelenk-Arm montiert, robust und mit einem kapazitiven Touchdisplay ausgestattet. Es ist für zwei chirurgische Saugschläuche und zwei Zusatzinstrumente vorgesehen.



# VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE, INTUITIVE BEDIENUNG



## EINSTELLUNGEN

In diesem Menü können individuelle Parameter für bis zu fünf Bediener und Timer für verschiedene Funktionen eingestellt werden.



## COUNTDOWN

In diesem Abschnitt kann der Countdown eingestellt werden.



## ZAHNSTEINFERNUNG

In diesem Abschnitt ist es möglich:

- in verschiedenen Modi zu arbeiten; Endo, Scaling, Perio;
- den Fluss der Peristaltikpumpe zu steuern;
- den proportionalen Modus zu aktivieren.



## RESTAURATIV - ENDO - CHIRURGIE

In der Basisausführung mit dem Bien Air MCX-Motor sind die Funktionen für konservierende Zahnheilkunde und Endodontie implementiert. Das Chirurgiemodul mit dem Bien Air MX2-Motor und der Peristaltikpumpe kann chirurgische, endodontische und konservierende Eingriffe durchführen. Der MX2 hat ein einstellbares Drehmoment von 0,3 Ncm bis über 70 Ncm, abhängig vom gewählten Unternehmungshandstück. Die exklusive Cruise-Control-Funktion von Miglionico im Endodontie-Modus ermöglicht das Arbeiten, ohne den Fuß auf dem Pedalhebel halten zu müssen.



## MDS / MDS+ SYSTEMS

Systeme zur Dekontaminierung von Wasserkreisläufen mit WK-Flüssigkeit von Metasys. Das MDS-System mischt WK-Flüssigkeit kontinuierlich mit Leitungs- oder Flaschenwasser, verhindert die Bildung von Kalk und Biofilm und reduziert so die bakterielle Belastung. Es trägt auch zur ordnungsgemäßen Funktion von Instrumentensprays bei.

Das System MDS+ kann über das Bedienfeld aktiviert werden. Nachdem Sie die Handstücke in den dafür vorgesehenen autoklavierbaren Halter gelegt haben, startet über das Bedienfeld der Zyklus zur Intensivdesinfektion. Wenn der Zyklus zur Intensivdesinfektion nicht aktiviert ist, arbeitet das System MDS+ im normalen MDS-Modus.

## Hygiene

Im Inneren der Wassereinheit lassen sich folgende Einheiten installieren:

### ASB-SYSTEM

2-Liter-Flasche für die autonome Wasserversorgung des Behandlungsmoduls. Ein Bypass-Ventil ermöglicht es, zwischen Leitungswasser und Wasser aus Flaschen zu wählen.



ABNEHMBARER UND IM DRUCKKESSEL WASCHBARER GRIFF FÜR BEDIENERBRETTCHEN



CHIRURGISCHE ABSAUGFILTER FÜR EINZELNE SCHLÄUCHE




ABNEHMBARER UND HYGIENISIERBARER BECKEN


## Integrierte Saugsysteme



ABLAUFVENTIL VOM SPEIBECKEN

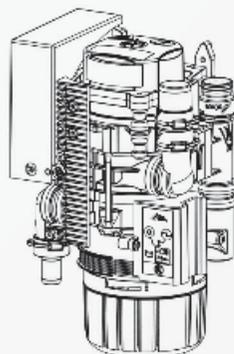


AMALGAMABSCHIEDER

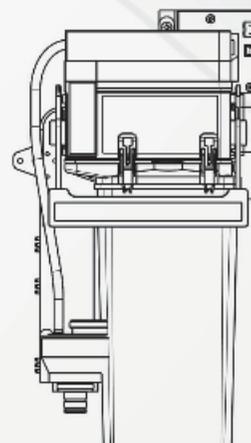

LUFT-/WASSERABSCHIEDER

Standardmäßig für die Nassabsaugung vorgesehen. Verfügbarkeit von integrierten Systemen an der Behandlungseinheit bei Trockenabsaugung und von Vorrichtungen zur Einhaltung der geltenden Gesetze zur Amalgamsorgung.

## NT Ausführung beidhändig

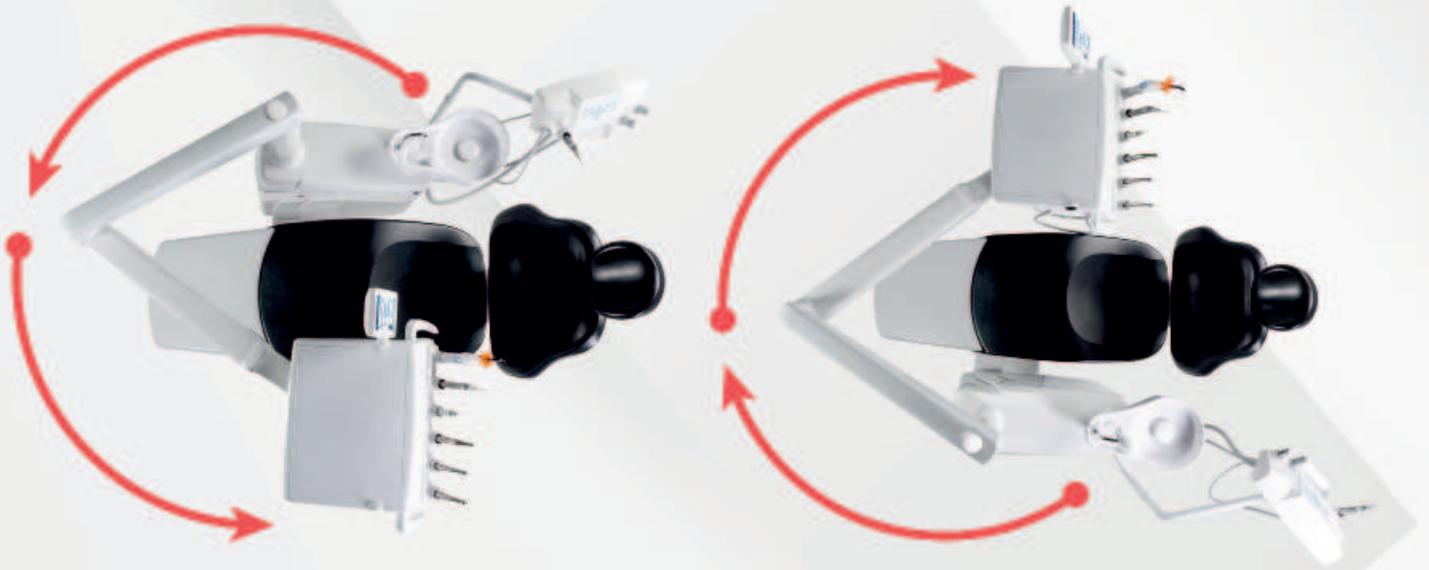

## Ausführung Surgery mit Cart



## Stuhl

Der Stuhl ist so konzipiert, dass er Komfort und Ergonomie bei der Arbeit bietet. Gepolstert mit nahtlosem medizinischem Skai-Leder für eine einfache Desinfektion. Die synchrone Bewegung von Rückenlehne und Sitz sorgt für optimalen Komfort und verhindert ein Hin- und Herrutschen. Die anatomisch geformte Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze ist in zwei Varianten erhältlich: Standard für alle Arbeitsergonomien und breit mit Memory-Schaum für die Chirurgie oder für mehr Patientenkomfort, ideal für längere Behandlungen.



CLASSIC RÜCKENLEHNE

XL MEMORY SCHAUM


## Anpassbare Rückenlehne

Maximaler Komfort für den Patienten, der dank der Höhenverstellung der Rückenlehne und dem patentierten motorisierten vertikalen Auszugssystem optimal liegt. Die drei Höheneinstellungen werden intuitiv über die entsprechenden Symbole auf dem Display ausgewählt. Das S.A.-System, das als Option für alle Miglionico-Rückenlehnen erhältlich ist, gewährleistet die korrekte Positionierung des Kopfes des Patienten auf der voll verstellbaren Kopfstütze, egal ob es sich um ein Kind (ab 1,30 m) oder einen Erwachsenen handelt.



## Fußanlasser

Der Fußanlasser ist solide, optimal ausgerichtet und verfügt über einen Stahlsockel, der für Stabilität bei der Benutzung sorgt. Der Griff ist einziehbar und erleichtert so den Transport. Erhältlich in der Standard- oder Push-Version, kabelgebunden oder kabellos.

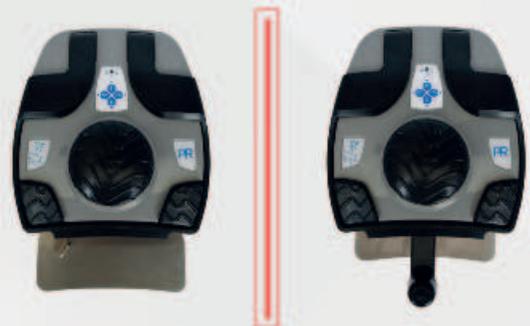

## Farben

### STANDARDFARBEN



### SONDERFARBEN





**miglionico**  
DENTAL EQUIPMENT

**Miglionico S.r.l.**

Via Molise, Lotti 67/68 Z.I.

70021 - Acquaviva delle Fonti (BA) ITALY

P. Iva: 05306940726

Tel +39 080 759552

[www.miglionico.eu](http://www.miglionico.eu)

[info@miglionico.net](mailto:info@miglionico.net)



Italy:

[commerciale@miglionico.net](mailto:commerciale@miglionico.net)

Eu & Extra Eu

[export@miglionico.net](mailto:export@miglionico.net)

